

# Masážní přístroj na nohy s manžetami na lýtka

č. výrobku 136539498


## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.*

### Funkce přístroje

Tento masážní přístroj na nohy disponuje hnětací masážní funkcí, vyhřívací masážní funkcí a funkcí masáže tlakem vzduchu. K dispozici jsou tři režimy. Funkce masáže tlakem vzduchu automaticky rozpozná, jestli jsou dodatečně instalovány návleky na lýtka či nikoliv a máte na výběr mezi třemi stupni intenzity. Poté, co připojíte masážní přístroj na nohy síťovým adaptérem ke zdroji napájení, přepne se do pohotovostního stavu. Funkce jednotlivých tlačítek jsou následující:

### Funkce tlačítek

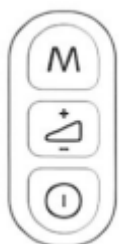

V pohotovostním režimu stiskněte toto tlačítko pro zapnutí přístroje. Provozní ukazatel svítí červeně. Všechna tlačítka jsou nyní připravena k provozu. Ve standardním-základním nastavení bude přístroj provozován v režimu 1 a na stupeň intenzity 2, provozní ukazatelé svítí fialově. Funkce vyhřívání je zapnutá. Začne odpočítávání (standardní časovač je 15 minut). Stiskněte tlačítko, pro vypnutí funkce vyhřívání. Stiskněte tlačítko znovu, pro opětovné zapnutí vyhřívací funkce. Když je funkce vyhřívání zapnutá, svítí provozní ukazatel tohoto tlačítka červeně. Pokud je funkce vyhřívání vypnutá, svítí modře. Pro vypnutí přístroje podržte toto tlačítko zmáčknuté. Po 15 minutách nepřetržitého provozu bude masážní pohyb automaticky deaktivován a přístroj se vypne.



Pokud je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko pro změnění režimu. Stiskněte tlačítko jednou pro změnu na další režim. Pořadí pro změnu je následující:

- režim 1 (tlak vzduchu a hnětení, provozná ukazatel fialový)
- režim 2 (jen hnětení, provozní ukazatel modrý)
- režim 3 (jen tlak vzduchu, provozní ukazatel červený)
- režim 1



V režimu tlakové masáže stiskněte toto tlačítko pro nastavení intenzity tlakové masáže. Stiskněte toto tlačítko jednou, pro přepnutí na další vyšší intenzitu. Pořadí pro změnu je následující:

- nízká úroveň (ukazatel intenzity modrý)
- střední úroveň (ukazatel intenzity fialový)
- vysoká úroveň (ukazatel intenzity červený)
- nízká úroveň

### **Dodatečné připojení manžet na lýtka**



trojitá přípojka pro dodatečné manžety na lýtka

Lýtkové manžety nejprve nasadíte a poté zapojíte.



### **Likvidace starých přístrojů**

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.